



Spectroscopie optique de A à Z sous R

Bernard Panneton, ing. PhD – pannetonb@gmail.com

Alain Clément, PhD – Chercheur

Centre de R&D de St-Hyacinthe, Agriculture et Agroalimentaire Canada
alain.clement@canada.ca

Motivation

Limitations des solutions commerciales

- Acquisition de donnée
 - Manque de souplesse pour l'acquisition
 - Structure et format de stockage des données unique au logiciel
 - Souvent 1 spectre par fichier!
 - Difficile de coordonner l'acquisition de spectres sur plus d'un instrument et plus d'une source lumineuse.
- Traitement des données avec logiciels commerciaux
 - Excellents logiciels disponibles
 - Coûteux
 - Généraliste donc plus difficile de créer des pipelines de travail (beaucoup de clics!)
 - Importation des données pas toujours facile

Motivation

Nos besoins

- Mettre en place des pipelines d'acquisition plus élaborés:
 - Plusieurs type de spectre (transmittance, fluorescence, Raman...)
 - Plusieurs spectromètres
 - Plusieurs sources lumineuses
 - Automatisation du positionnement des échantillons
- Éliminer la manipulation directe des données brutes
 - « Copier – Coller » dans un chiffrier est le meilleur chemin pour générer des erreurs!
- Environnement plus flexible de traitement des données et pour le développement de modèles.
- Rendre la chaîne acquisition – validation – traitement plus accessible

Pourquoi R

- Excellent environnement pour l'analyse des données
 - python est là mais je connaissais R...
- Aucun frais de déploiement sur autant de stations de travail que nécessaire


Exemple d'application

SpectrAcer III - Inspection du sirop d'érable




SpectrAcer III

Inspection du sirop d'érable

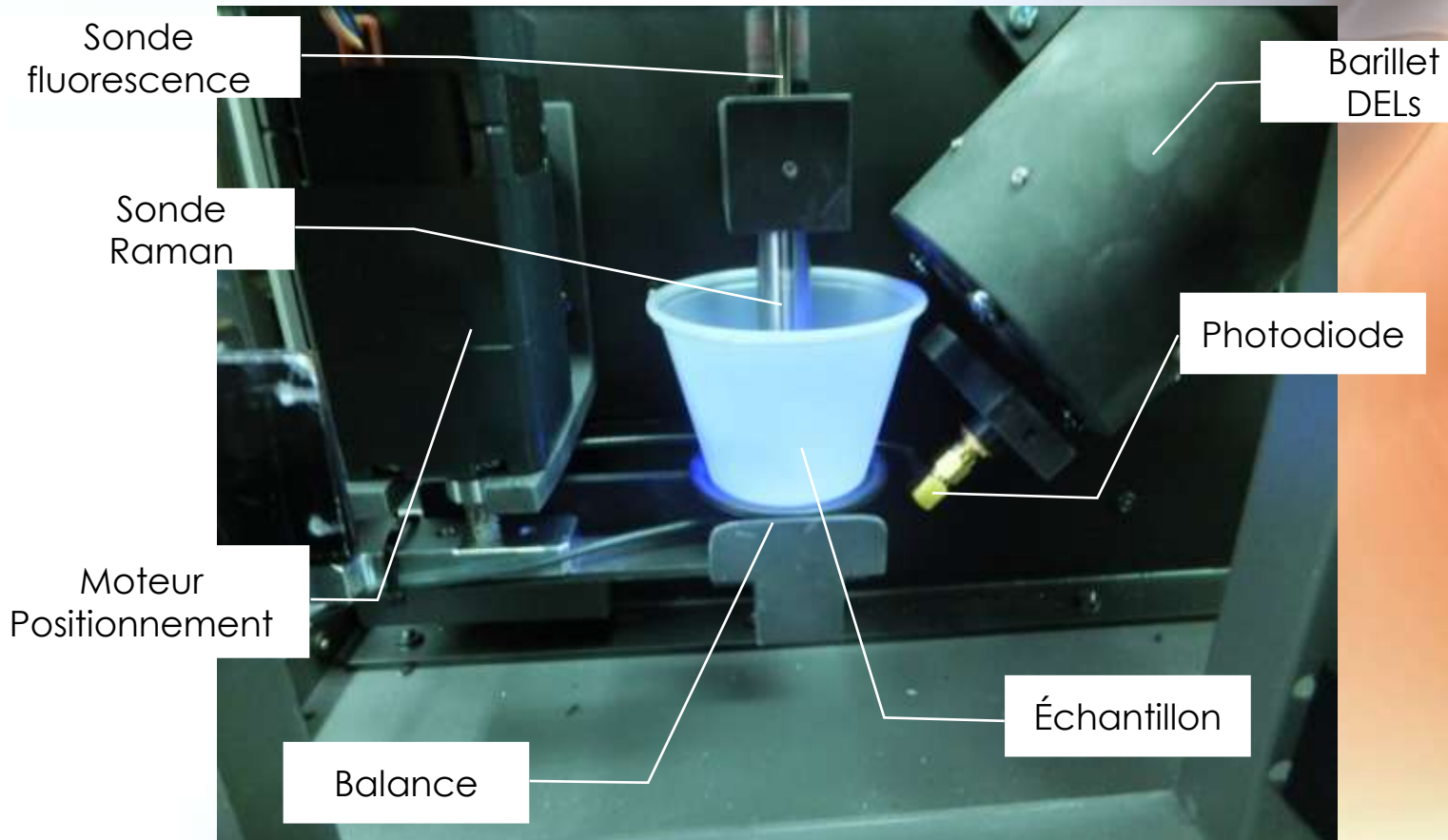

SpectrAcer III

Inspection du sirop d'érable

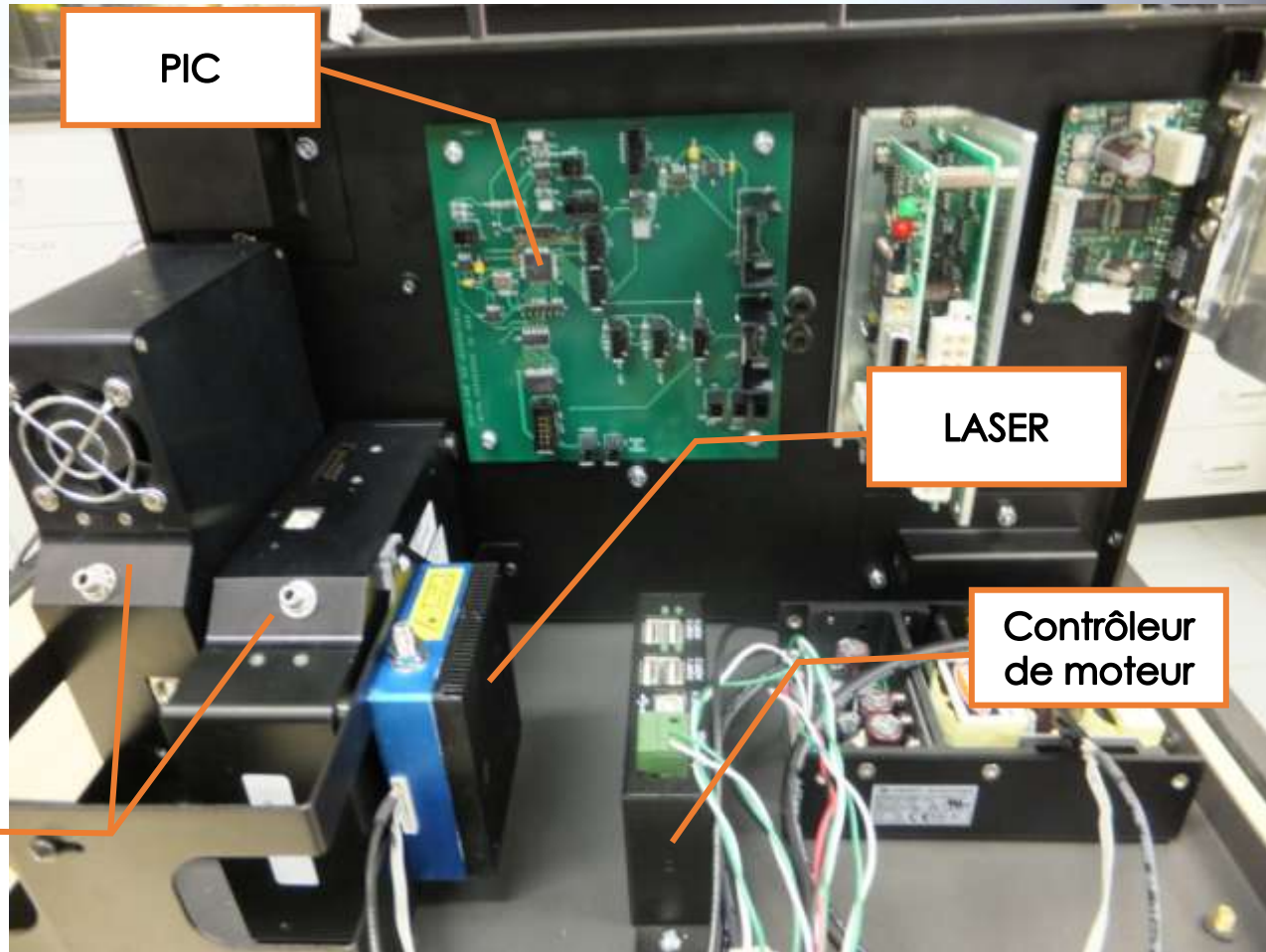

SpectrAcer III – Interface usager

SpectrAcer_III 0.10 - B. Panneton - Mars 2019

Messages à l'utilisateur
Analyse complétée
Échantillon conforme

Identifications
Usager: Bernard Panneton
Site: CRDA

Répertoire pour les données
NON DÉFINI!

ID d'échantillon
1826-02582

Démarrer l'analyse

Températures
Déecteur Raman: -10°C
Boîtier: 24.5°C

Console
SpectrAcer III
Fri May 03 14:49:31 2019
Démarrage
Échantillon: 1826-02582

Console vers fichier Nom de fichier

Fichier de sortie pour la console
D:/Bernard/Documents/Consultant/ACER_2019/Progs/Console_03_05_2019_14h49.txt

EX1
Intensity (U.A.) vs Longueur d'onde (nm)


Raman brut
Intensity (U.A.) vs Nombre d'onde (1/cm)

EX2
Intensity (U.A.) vs Longueur d'onde (nm)


RAMAN sans ligne de base
Intensity (U.A.) vs Nombre d'onde (1/cm)

EX3
Intensity (U.A.) vs Longueur d'onde (nm)


Exemple d'application - SpectrAAC

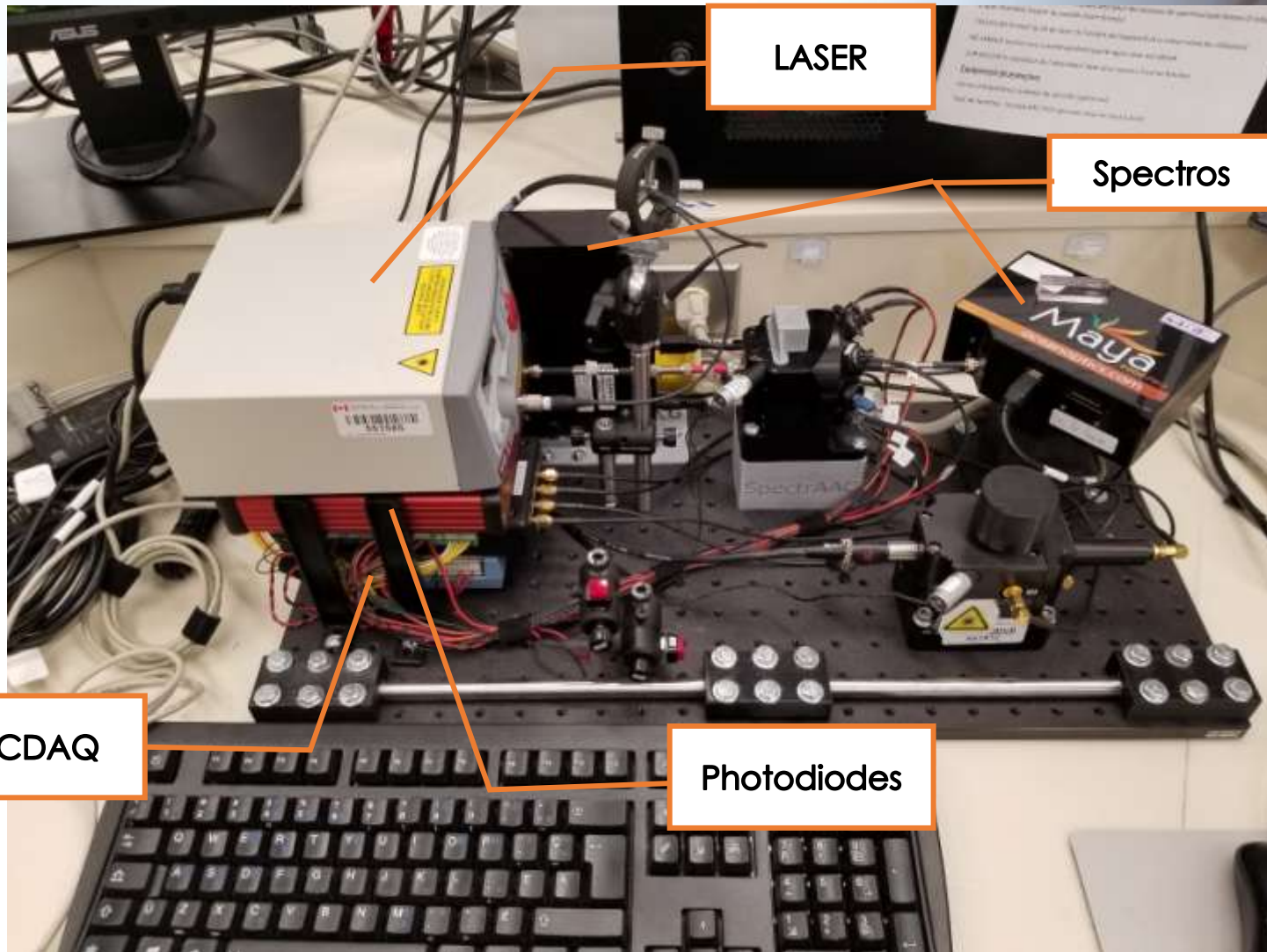

PolySpecteur – Interface usager

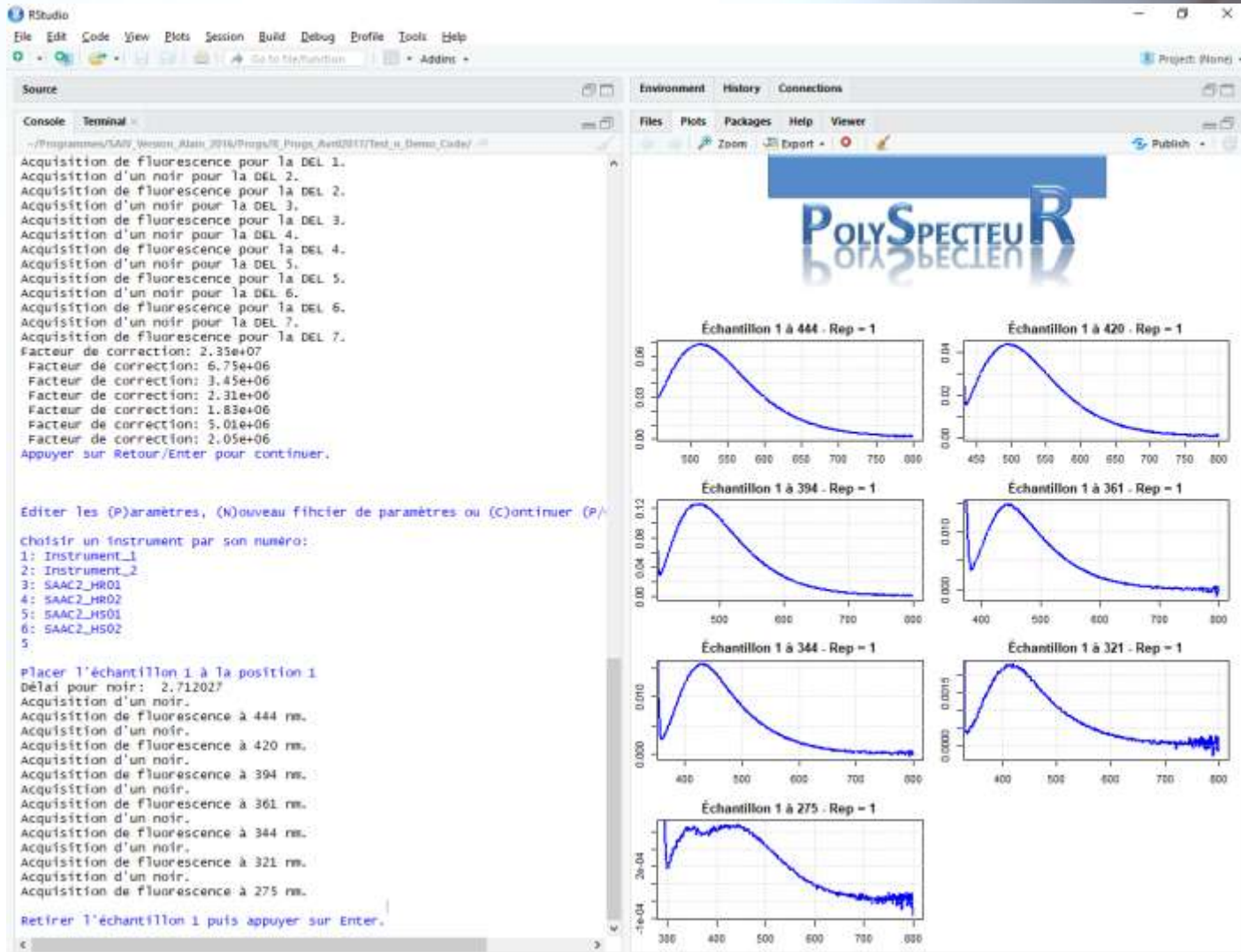


Écosystème de spectroscopie

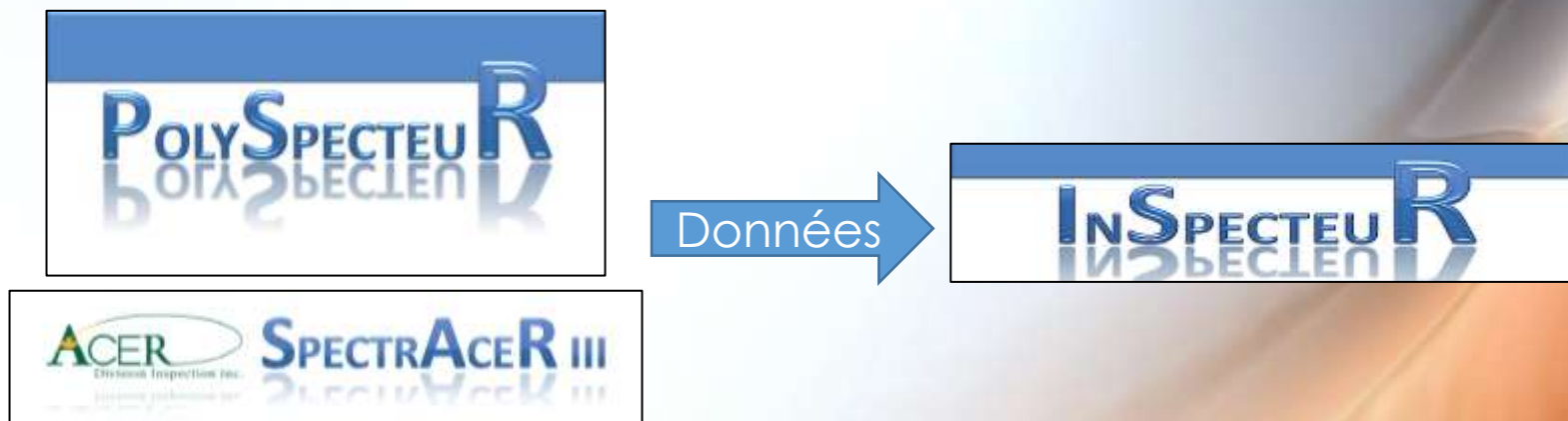

- Interface usager
 - Rstudio
 - GUI sous gWidgets2 et RGtk2
- OOInterface.r
 - Java library
 - Package rJava
- MCDAQ.r
 - A C++ dll
 - .C du package base
- RS232
 - Commande de moteurs
 - Commande d'un laser
 - Package serial ou tcltk
- GUI
 - Packages gWidgets2 et RGtk2
- Packages de chimiométrie
 - ChemoSpec,
 - chemometrics,
 - prospectr,
 - caret,
 - stats

Écosystème de spectroscopie

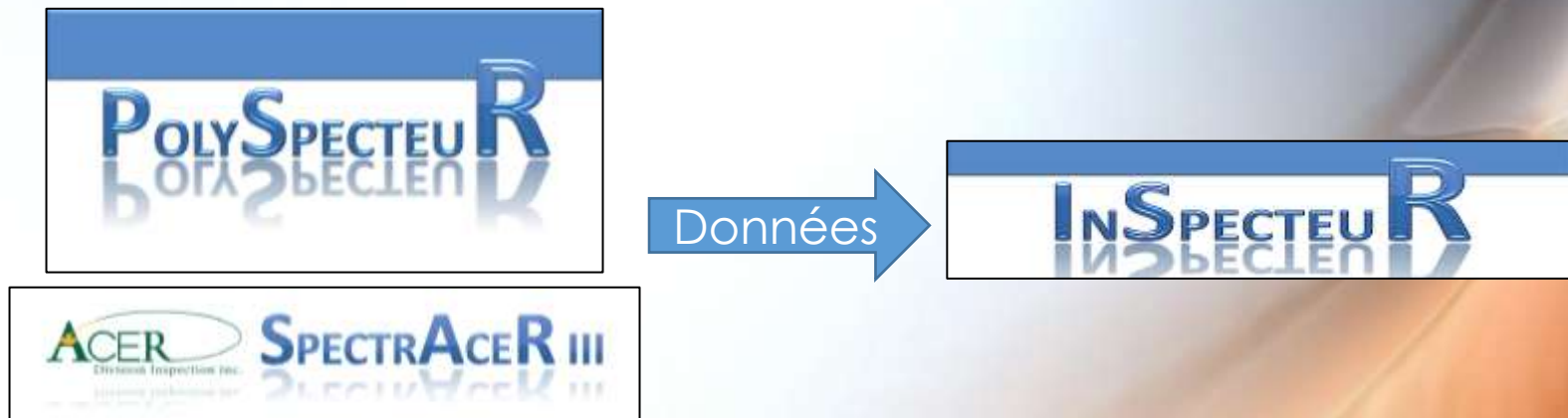

- Interface usager
 - Rstudio
 - GUI sous gWidgets2 et RGtk2
- OOInterface.r
 - Java library
 - Package rJava
- MCDAQ.r
 - A C++ dll
 - .C du package base
- RS232
 - Commande de moteurs
 - Commande d'un laser
 - Package serial ou tcltk
- GUI
 - Packages gWidgets2 et RGtk2
- Packages de chimiométrie
 - ChemoSpec,
 - chemometrics,
 - prospectr,
 - caret,
 - stats

rJava

JAVA – Méthodes de la classe Wrapper


openAllSpectrometers

```
public int openAllSpectrometers()
```

Returns:

int the number of spectrometers found.

Returns -1 if an I/O error occurred. In this case, call `getLastException()` to determine the nature of the error.

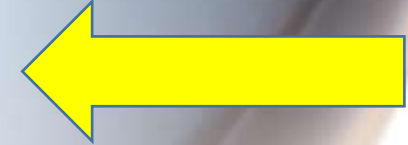

Accéder à Java depuis R

```
library(rJava)
```

Initialiser un objet de la classe Wrapper

```
ooi_home=Sys.getenv("OOI_HOME")
mypath=file.path(ooi_home,"OmniDriver.jar")
.jinit()
.jaddClassPath(mypath)
mywrap<-.jnew("com.oceanoptics.omnidriver.api.wrapper.wrapper")
```

Utiliser les méthodes de la classe Wrapper

```
nbspectro <- mywrap$openAllSpectrometers()
xaxis=mywrap$getwavelengths(as.integer(1:nbspectro$number))
```


rJava

JAVA – Méthodes de la classe Wrapper

openAllSpectrometers

```
public int openAllSpectrometers()
```

Returns:

int the number of spectrometers found.

Returns -1 if an I/O error occurred. In this case, call `getLastException()` to determine the nature of the error.

Accéder à Java depuis R


```
library(rJava)
```

Initialiser un objet de la classe Wrapper

```
ooi_home=Sys.getenv("OOI_HOME")
mypath=file.path(ooi_home,"OmniDriver.jar")
.jinit()
.jaddClassPath(mypath)
mywrap<-.jnew("com.oceanoptics.omnidriver.api.wrapper.wrapper")
```

Utiliser les méthodes de la classe Wrapper

```
nbspectro <- mywrap$openAllSpectrometers()
xaxis=mywrap$getwavelengths(as.integer(1:nbspectro$number))
```

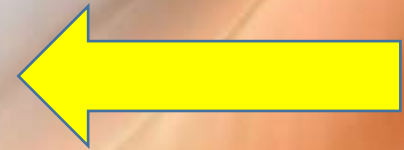

rJava

JAVA – Méthodes de la classe Wrapper

openAllSpectrometers

```
public int openAllSpectrometers()
```

Returns:

int the number of spectrometers found.


Returns -1 if an I/O error occurred. In this case, call `getLastException()` to determine the nature of the error.

Accéder à Java depuis R

```
library(rJava)
```

Initialiser un objet de la classe Wrapper

```
ooi_home=Sys.getenv("OOI_HOME")
mypath=file.path(ooi_home,"OmniDriver.jar")
.jinit()
.jaddClassPath(mypath)
mywrap<-.jnew("com.oceanoptics.omnidriver.api.wrapper.wrapper")
```

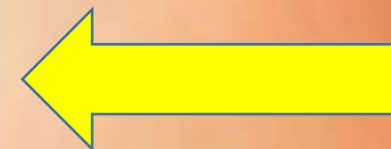

Utiliser les méthodes de la classe Wrapper

```
nbspectro <- mywrap$openAllSpectrometers()
xaxis=mywrap$getwavelengths(as.integer(1:nbspectro$number))
```

rJava

JAVA – Méthodes de la classe Wrapper

openAllSpectrometers

```
public int openAllSpectrometers()
```

Returns:

int the number of spectrometers found.

Returns -1 if an I/O error occurred. In this case, call `getLastException()` to determine the nature of the error.

Accéder à Java depuis R


```
library(rJava)
```

Initialiser un objet de la classe Wrapper


```
ooi_home=Sys.getenv("OOI_HOME")
mypath=file.path(ooi_home,"OmniDriver.jar")
.jinit()
.jaddClassPath(mypath)
mywrap<-.jnew("com.oceanoptics.omnidriver.api.wrapper.wrapper")
```

Utiliser les méthodes de la classe Wrapper

```
nbspectro <- mywrap$openAllSpectrometers()
xaxis=mywrap$getwavelengths(as.integer(1:nbspectro$number))
```

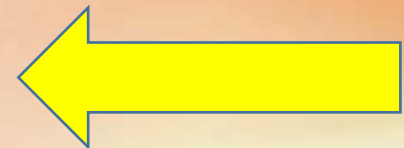

Écosystème de spectroscopie

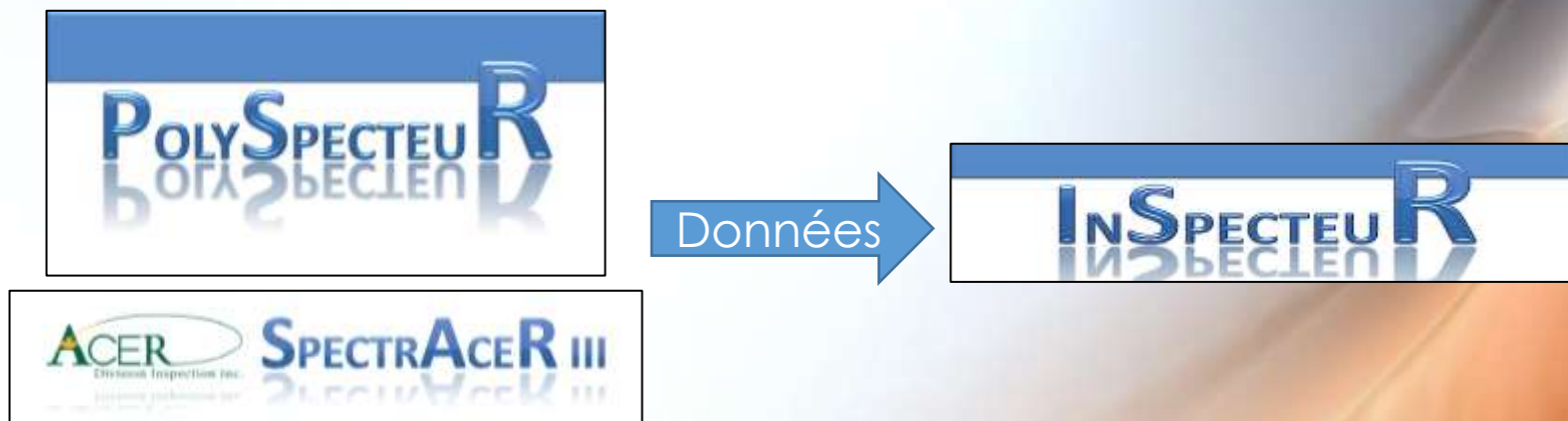

- Interface usager
 - Rstudio
 - GUI sous gWidgets2 et RGtk2
- OOInterface.r
 - Java library
 - Package rJava
- MCDAQ.r
 - A C++ dll
 - .C du package base
- RS232
 - Commande de moteurs
 - Commande d'un laser
 - Package serial ou tcltk
- GUI
 - Packages gWidgets2 et RGtk2
- Packages de chimiométrie
 - ChemoSpec,
 - chemometrics,
 - prospectr,
 - caret,
 - stats

<http://r-pkgs.had.co.nz/src.html>

- Getting started with `.C()`
- `.C()` is simpler than `.Call()` and can be useful if you already have standard C code. Since you never create R objects in `.C()`, you never need to worry about memory management. To use it, you first write a void C function, using in-place modification of function parameters to return values:
 - ```
void add_(double* x, double* y, double* out) {
```
  - ```
  out[0] = x[0] + y[0];
```
 - ```
}
```
- Then like `.Call()` you create an R wrapper:
  - ```
#' @useDynLib mypackage add_
```
 - ```
add <- function(x, y) {
```
  - ```
  .C(add_, x, y, numeric(1))[[3]]
```
 - ```
}
```
- (Here we extract the 3rd element of the result because that corresponds to the out parameter.)
- `.C()` automatically converts back and forth between R vectors and their C equivalents:
  - R type C type
  - logical `int*`
  - integer `int*`
  - double `double*`
  - character `char**`
  - raw `unsigned char*`
- Note that `.C()` assumes your function doesn't know how to deal with missing values and will throw an error if any arguments contain an NA. If it can correctly handle missing values, set `NAOK = TRUE` in the call to `.C()`.
- You can learn more about `.C()` in its help, `?C` and in R-extensions.



# Interface .C (base package)

.C() is simpler than .Call() and can be useful if you already have standard C code.<sup>1</sup>

- **Fonction de la librairie**

- `int cbDConfigBit(int BoardNum, int PortType, int BitNum, int Direction)`

- **Fonction d'interface cbw64.dll -> MC\_cbw64\_CWrapper.c**

- `void BP_cbDConfigBit( int *BoardNum, int *PortType, int *BitNum, int *Direction, int *out)`  
// Direction = 1 pour out; = 2 pour in  
{  
  int y;  
  y=cbDConfigBit(\*BoardNum, \*PortType, \*BitNum, \*Direction);  
  \*out=y;  
}

- **Compiler**

- `system("R CMD SHLIB MC_cbw64_CWrapper.c -L. cbw64.dll")`

- **Librairie R**

- `dyn.load(« ...//Progs//C//MC_cbw64_CWrapper.dll »)`
  - `Config_IO_Bit<-function(bnum, type, bit, direct){  
  err=.C("BP_cbDConfigBit", BoardNum=as.integer(bnum), PortType=as.integer(type),  
          BitNum = as.integer(bit), Direction=as.integer(direct), out=as.integer(0))$out  
  if (err!=0) return(paste("Échec de la configuration du bit ", as.character(bit),  
                          " sur le module ", as.character(bnum), sep=""))  
  else return("O.K")  
}`

<sup>1</sup><http://r-pkgs.had.co.nz/src.html>

# Interface .C (base package)

- **Fonction de la librairie**

- `int cbDConfigBit(int BoardNum, int PortType, int BitNum, int Direction)`

- **Fonction d'interface cbw64.dll -> MC\_cbw64\_CWrapper.c**

- `void BP_cbDConfigBit( int *BoardNum, int *PortType, int *BitNum, int *Direction, int *out)`  
// Direction = 1 pour out; = 2 pour in  
{  
  int y;  
  y=cbDConfigBit(\*BoardNum, \*PortType, \*BitNum, \*Direction);  
  \*out=y;  
}

- **Compiler**

- `system("R CMD SHLIB MC_cbw64_CWrapper.c -L. cbw64.dll")`

- **Librairie R**

- `dyn.load(« ...//Progs//C//MC_cbw64_CWrapper.dll »)`
- `Config_IO_Bit<-function(bnum, type, bit, direct){`  
  `err=.C("BP_cbDConfigBit", BoardNum=as.integer(bnum), PortType=as.integer(type),`  
    `BitNum = as.integer(bit), Direction=as.integer(direct), out=as.integer(0))` `$out`  
  if (err!=0) return(paste("Échec de la configuration du bit ", as.character(bit),  
    " sur le module ", as.character(bnum), sep=""))  
  else return("O.K")  
}

# Interface .C (base package)

- **Fonction de la librairie**

- `int cbDConfigBit(int BoardNum, int PortType, int BitNum, int Direction)`

- **Fonction d'interface cbw64.dll -> MC\_cbw64\_CWrapper.c**

- `void BP_cbDConfigBit( int *BoardNum, int *PortType, int *BitNum, int *Direction, int *out)`  
// Direction = 1 pour out; = 2 pour in  
{  
 int y;  
 y=cbDConfigBit(\*BoardNum, \*PortType, \*BitNum, \*Direction);  
 \*out=y;  
}

- **Compiler**

- `system("R CMD SHLIB MC_cbw64_CWrapper.c -L. cbw64.dll")`

- **Librairie R**

- `dyn.load(« ...//Progs//C//MC_cbw64_CWrapper.dll »)`
- `Config_IO_Bit<-function(bnum, type, bit, direct){`  
    `err=.C("BP_cbDConfigBit", BoardNum=as.integer(bnum), PortType=as.integer(type),`  
        `BitNum = as.integer(bit), Direction=as.integer(direct), out=as.integer(0))` **\$out**  
    if (err!=0) return(paste("Échec de la configuration du bit ", as.character(bit),  
        " sur le module ", as.character(bnum), sep=""))  
    else return("O.K")  
}



# Interface .C (base package)

- **Fonction de la librairie**

- `int cbDConfigBit(int BoardNum, int PortType, int BitNum, int Direction)`

- **Fonction d'interface cbw64.dll -> MC\_cbw64\_CWrapper.c**

- `void BP_cbDConfigBit( int *BoardNum, int *PortType, int *BitNum, int *Direction, int *out)`  
// Direction = 1 pour out; = 2 pour in  
{  
  int y;  
  y=cbDConfigBit(\*BoardNum, \*PortType, \*BitNum, \*Direction);  
  \*out=y;  
}

- **Compiler**


- `system("R CMD SHLIB MC_cbw64_CWrapper.c -L. cbw64.dll")`

- **Librairie R**

- `dyn.load(« ...//Progs//C//MC_cbw64_CWrapper.dll »)`
- `Config_IO_Bit<-function(bnum, type, bit, direct){`  
  `err=.C("BP_cbDConfigBit", BoardNum=as.integer(bnum), PortType=as.integer(type),`  
    `BitNum = as.integer(bit), Direction=as.integer(direct), out=as.integer(0))` **\$out**  
  if (err!=0) return(paste("Échec de la configuration du bit ", as.character(bit),  
    " sur le module ", as.character(bnum), sep=""))  
  else return("O.K")  
}



# Écosystème de spectroscopie

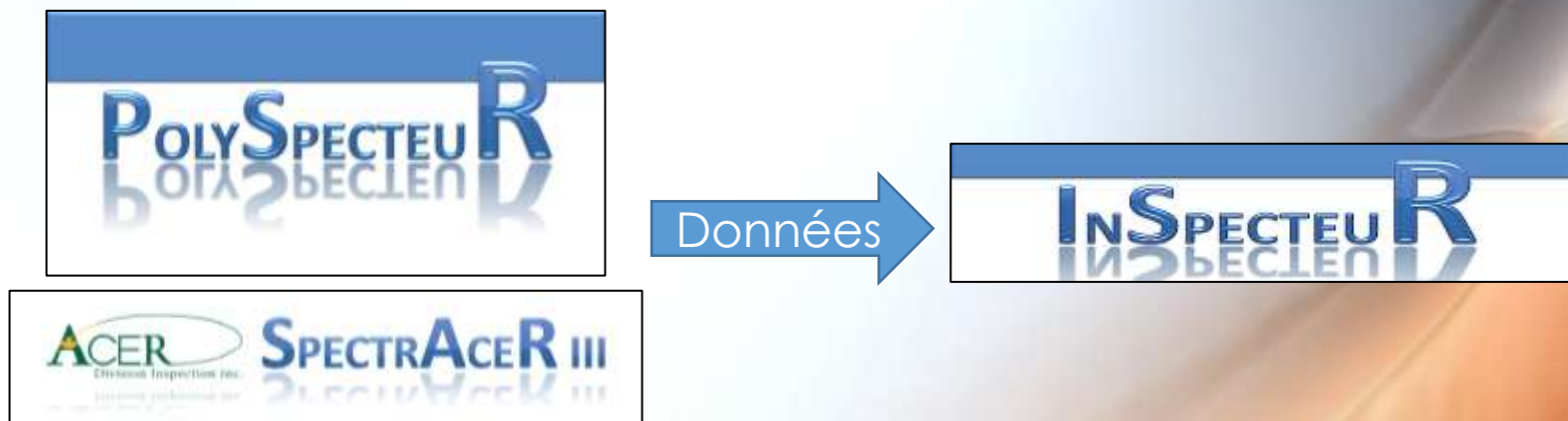

- Interface usager
  - Rstudio
  - GUI sous gWidgets2 et RGtk2
- OOInterface.r
  - Java library
  - Package rJava
- MCDAQ.r
  - A C++ dll
  - .C du package base
- RS232
  - Commande de moteurs
  - Commande d'un laser
  - Package serial ou tcltk
- GUI
  - Packages gWidgets2 et RGtk2
- Packages de chimiométrie
  - ChemoSpec,
  - chemometrics,
  - prospectr,
  - caret,
  - stats



# Communication série – RS232

## Package serial



# Communication série – RS232

## Package serial

```
baud_rate = c(9600, 4800, 14400) #valeurs possibles de baudrate.
tout=2 #toute les commandes devraient s'exécuter en dedans de 2 secondes

#Obtenir une liste des ports
listports=listPorts()

#Avec deux boucles (ports puis baudrate), on ouvre un port et on teste des
#baudrates jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse 'PIC' à la commande
'C$ID00000'. On balaye les ports dans l'ordre inverse de 'listports' car
#souvent le bon port est le dernier attribué pour passer le caractère '$' dans
#la commande: '\\x24' Le double \ est nécessaire pour éviter que R interprète
#'\x24' comme '$' avant de passer la commande.
commande='C\\x24ID00000' #


for (cp in rev(listports)){
 nom_port<-"SAIII_PIC" #nom
 # On teste les baudrate
 for (br in baud_rate){

 #Configuration du port
 le_com <- serialConnection(name=nom_port, port=cp,
 mode=paste(br,'n,8,1',sep=''),
 newline = TRUE,
 translation = 'crlf',
 handshake='none')

 open(le_com)
 sys.sleep(0.1)

 #Envoie la commande
 #Besoin d'ajouter crlf?
 dum <- write.serialConnection(le_com,commande)

 #Read
 le_t=0
 dum=NULL
 while (is.null(dum) & le_t<tout){
 dum <- read.serialConnection(le_com)
 if (debug_me) cat('Réponse à ',commande,': ',dum,'\n')
 sys.sleep(0.1)
 le_t=le_t+0.1
 }
 }
}
```

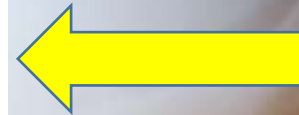

# Communication série – RS232

## Package serial

```
baud_rate = c(9600, 4800, 14400) #valeurs possibles de baudrate.
tout=2 #toute les commandes devraient s'exécuter en dedans de 2 secondes

#Obtenir une liste des ports
listports=listPorts()

#Avec deux boucles (ports puis baudrate), on ouvre un port et on teste des
#baudrates jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse 'PIC' à la commande
#'C$ID00000'. On balaye les ports dans l'ordre inverse de 'listports' car
#souvent le bon port est le dernier attribué pour passer le caractère '$' dans
#la commande: '\\x24' Le double \ est nécessaire pour éviter que R interprète
#'\x24' comme '$' avant de passer la commande.
commande='C\\x24ID00000' #


for (cp in rev(listports)){
 nom_port<-"SAIII-PIC" #nom
 # On teste les baudrate
 for (br in baud_rate){

 #Configuration du port
 le_com <- serialConnection(name=nom_port, port=cp,
 mode=paste(br,'n,8,1',sep=''),
 newline = TRUE,
 translation = 'crlf',
 handshake='none')

 open(le_com)
 sys.sleep(0.1)

 #Envoie la commande
 #Besoin d'ajouter crlf?
 dum <- write.serialConnection(le_com,commande)

 #Read
 le_t=0
 dum=NULL
 while (is.null(dum) & le_t<tout){
 dum <- read.serialConnection(le_com)
 if (debug_me) cat('Réponse à ',commande,': ',dum,'\n')
 sys.sleep(0.1)
 le_t=le_t+0.1
 }
 }
}
```

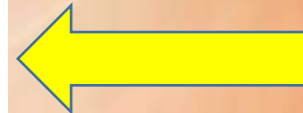

# Communication série – RS232

## Package serial

```
baud_rate = c(9600, 4800, 14400) #valeurs possibles de baudrate.
tout=2 #toute les commandes devraient s'exécuter en dedans de 2 secondes

#Obtenir une liste des ports
listports=listPorts()

#Avec deux boucles (ports puis baudrate), on ouvre un port et on teste des
#baudrates jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse 'PIC' à la commande
#'$ID00000'. On balaye les ports dans l'ordre inverse de 'listports' car
#souvent le bon port est le dernier attribué pour passer le caractère '$' dans
#la commande: '\\x24' Le double \ est nécessaire pour éviter que R interprète
#'\x24' comme '$' avant de passer la commande.
commande='C\\x24ID00000' #


for (cp in rev(listports)){
 nom_port<-"SAIII_PIC" #nom
 # On teste les baudrate
 for (br in baud_rate){

 #Configuration du port
 le_com <- serialConnection(name=nom_port, port=cp,
 mode=paste(br,'n,8,1',sep=''),
 newline = TRUE,
 translation = 'crlf',
 handshake='none')

 open(le_com)
 sys.sleep(0.1)

 #Envoie la commande
 #Besoin d'ajouter crlf?
 dum <- write.serialConnection(le_com,commande)

 #Read
 le_t=0
 dum=NULL
 while (is.null(dum) & le_t<tout){
 dum <- read.serialConnection(le_com)
 if (debug_me) cat('Réponse à ',commande,': ',dum,'\n')
 sys.sleep(0.1)
 le_t=le_t+0.1
 }
 }
}
```

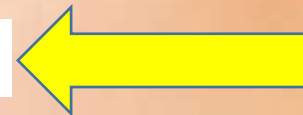

# Communication série – RS232

## Package serial

```
baud_rate = c(9600, 4800, 14400) #valeurs possibles de baudrate.
tout=2 #toute les commandes devraient s'exécuter en dedans de 2 secondes

#Obtenir une liste des ports
listports=listPorts()

#Avec deux boucles (ports puis baudrate), on ouvre un port et on teste des
#baudrates jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse 'PIC' à la commande
'C$ID00000'. On balaye les ports dans l'ordre inverse de 'listports' car
#souvent le bon port est le dernier attribué pour passer le caractère '$' dans
#la commande: '\\x24' Le double \ est nécessaire pour éviter que R interprète
#'\x24' comme '$' avant de passer la commande.
commande='C\\x24ID00000' #

for (cp in rev(listports)){
 nom_port<-"SAIII_PIC" #nom
 # On teste les baudrate
 for (br in baud_rate){

 #Configuration du port
 le_com <- serialConnection(name=nom_port, port=cp,
 mode=paste(br, 'n,8,1', sep=''),
 newline = TRUE,
 translation = 'crlf',
 handshake='none')

 open(le_com)
 sys.sleep(0.1)


 #Envoie la commande
 #Besoin d'ajouter crlf?
 dum <- write.serialConnection(le_com,commande)

 #Read
 le_t=0
 dum=NULL
 while (is.null(dum) & le_t<tout){
 dum <- read.serialConnection(le_com)
 if (debug_me) cat('Réponse à ',commande,': ',dum,'\n')
 sys.sleep(0.1)
 le_t=le_t+0.1
 }
 }
}
```





# Écosystème de spectroscopie

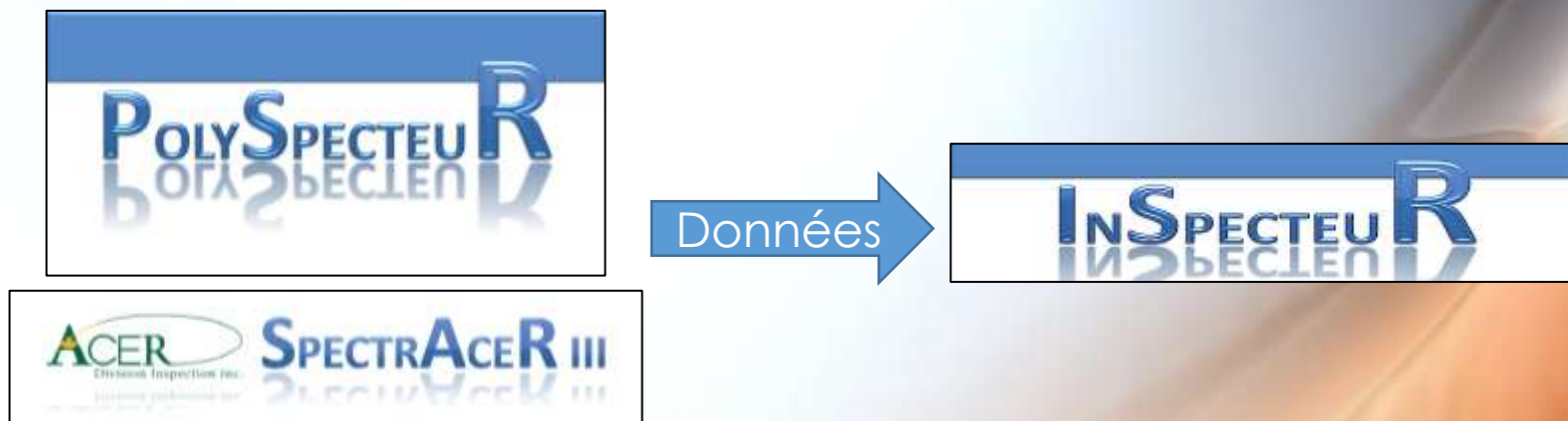

- Interface usager
  - Rstudio
  - GUI sous gWidgets2 et RGtk2
- OOInterface.r
  - Java library
  - Package rJava
- MCDAQ.r
  - A C++ dll
  - .C du package base
- RS232
  - Commande de moteurs
  - Commande d'un laser
  - Package serial ou tcltk

- GUI
  - Packages gWidgets2 et RGtk2
- Packages de chimiométrie
  - ChemoSpec,
  - chemometrics,
  - prospectr,
  - caret,
  - stats

Data selection Apply models PrePro PCA PLSDA PLS

D:\Bernard\mesProgs\R\InSpectoR\Data\Insectes\_MAF\_Avril2018\Y\_Test\_Maf.txt

OPEN a Y file

Spectral data files - Select

X Data Files

EX277\_Test\_Maf\_B.txt

EX277\_Test\_Maf\_I.txt

EX297\_Test\_Maf\_B.txt

EX297\_Test\_Maf\_I.txt

EX321\_Test\_Maf\_B.txt

EX321\_Test\_Maf\_I.txt

Define new factor

Aggregate spectra

Define subset

Find duplicate samples from Col. 1

Remove selected samples

Merge Y data files

Properties-

X-axis min

0

X-axis max

0

Y-axis min

0.0

Y-axis max

0.0

Hints

----- PLOT AREA -----

Right click to select 'Select', 'Zoom' modes and 'Copy' or 'Save'

Select mode: click for nearest or drag rectangle.

Zoom mode: click to zoom around or drag rectangle.

Right click and select Zoom all.

Right click to Copy/Save

----- TABLE AREA -----


Click/CtrlClick/ShiftClick in table to select samples

Click on a column for sorting and plot by factor. If column

Y data

| nt.1 | PosRep | Classe1               | Classe2            | NoSeqFile | NoSeq |
|------|--------|-----------------------|--------------------|-----------|-------|
| nt_1 | 1      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 129       | 129   |
| nt_1 | 2      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 130       | 130   |
| nt_1 | 3      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 131       | 131   |
| nt_1 | 4      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 132       | 132   |
| nt_1 | 1      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 133       | 133   |
| nt_1 | 2      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 134       | 134   |
| nt_1 | 3      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 135       | 135   |
| nt_1 | 4      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 136       | 136   |
| nt_1 | 1      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 137       | 137   |
| nt_1 | 2      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 138       | 138   |
| nt_1 | 3      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 139       | 139   |
| nt_1 | 4      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 140       | 140   |
| nt_1 | 1      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 141       | 141   |
| nt_1 | 2      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 142       | 142   |
| nt_1 | 3      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 143       | 143   |
| nt_1 | 4      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 144       | 144   |
| nt_2 | 1      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 145       | 145   |
| nt_2 | 2      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 146       | 146   |
| nt_2 | 3      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 147       | 147   |
| nt_2 | 4      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 148       | 148   |
| nt_2 | 1      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 149       | 149   |
| nt_2 | 2      | TenebrionCRDSH_refS46 | TenebrionCRDSH_ref | 150       | 150   |

## Pre-treated data

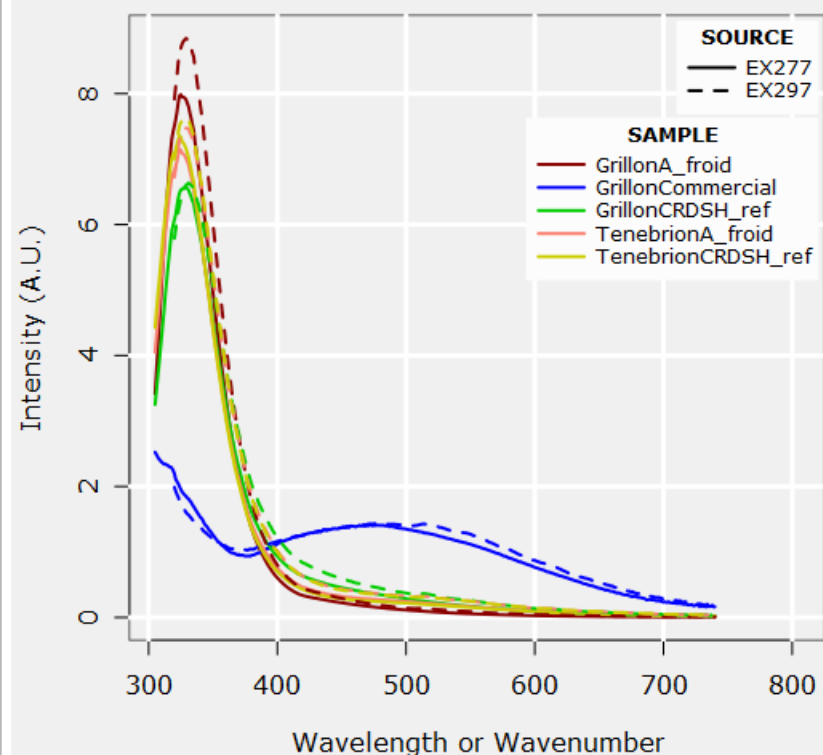

Data selection Apply models PrePro PCA PLSDA PLS

## Modeling definitions

Spectral data set(s) for PLSDA

X Data Files

EX277

EX297

Factor to predict

Pick a factor: Classe\_2

Train control options

Prop. of data for training: 0.6

Resampling method: cv

Number of folds: 5

Number of repetitions: 1

Training options

Nb of LVs (max): 4

PreProcessing: None

Prediction method: softmax

Performance metric: Kappa

Aggregation options

Aggregation operator: concatenate

Compute model

Save model

## Output area

Output controls

Accuracy - VL plot

Confusion matrix

☐ Validation☒ Test

Plot

Probs boxplot

☐ Validation☒ Test

Plot

Show probs


Plot B-coeff

## Console output

```

Specificity 0.9730
Pos Pred Value 0.9231
Neg Pred Value 0.9863
Prevalence 0.2525
Detection Rate 0.2424
Detection Prevalence 0.2626
Balanced Accuracy 0.9665

```

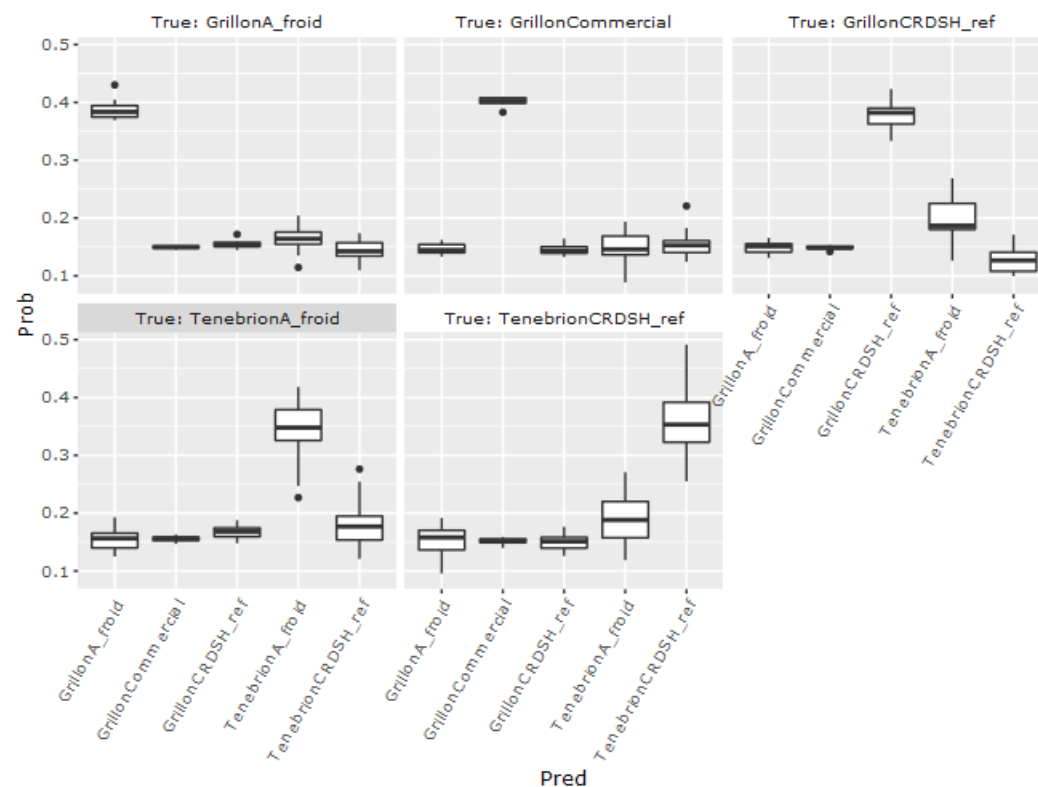

Console to txt

Pick an output file name

Output file name: D:/Bernard/Documents/Default\_PLSDA\_Ouput.txt

Data selection Apply models PrePro PCA PLSDA PLS

Spectral data set for PCA

EX277

Estimated number of significant PCs

4

Choose plot type

Scores

Pick PC1 (X-axis for score biplot or first loading)

1

Pick PC2 (Y-axis for score biplot or last loading)

2

Point coloring options

Grouping for score plot

Classe\_2

Point labeling options

Labels for score plot

None

Criteria

All

Data ellipse plotting

Pick option


None

Update plot

Remove selected from subset

Save scores

Save PCA model

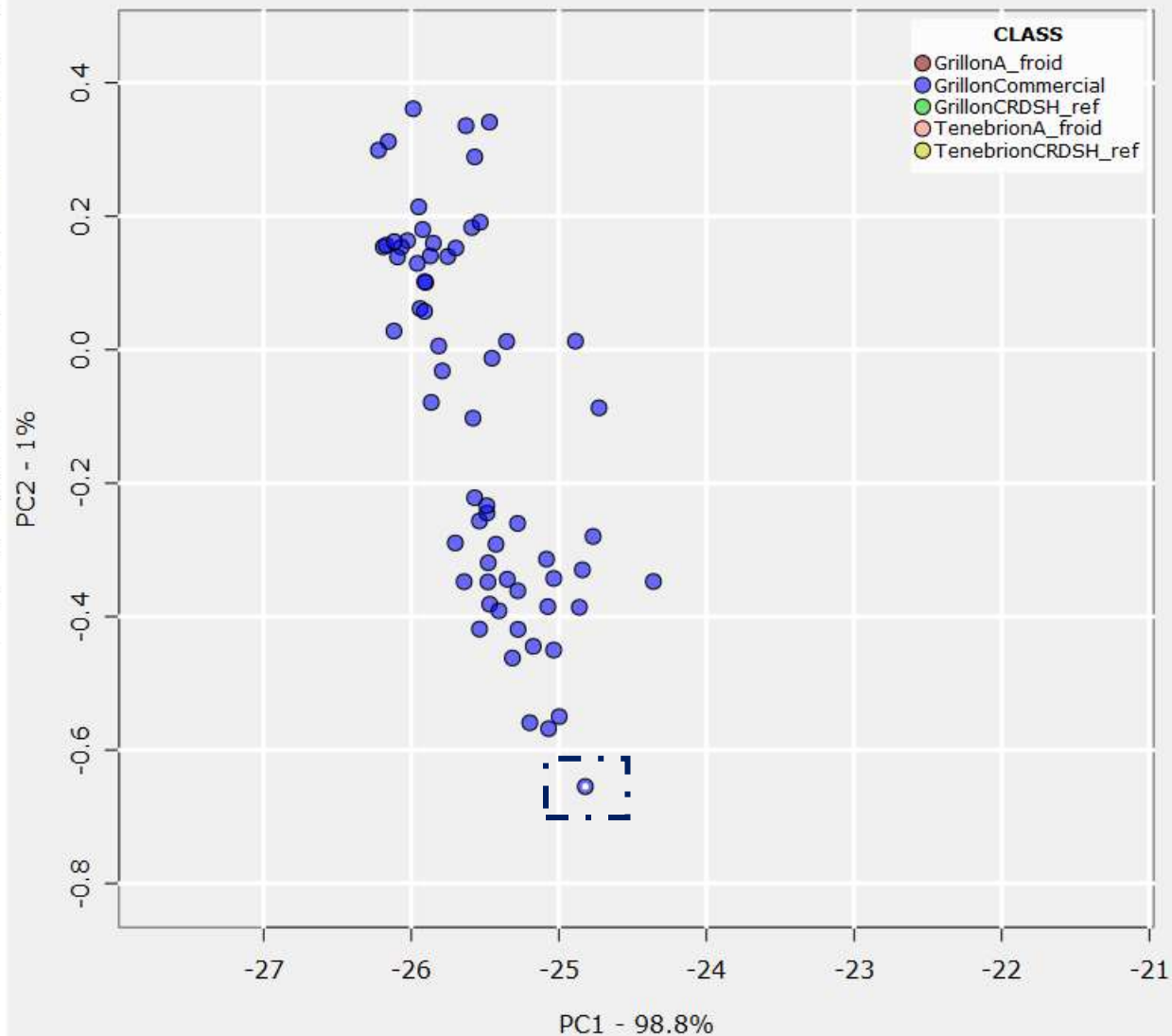

# Interaction de base avec graphiques

```
ggacp <- gwidgets2::ggraphics(cont=pca_tab,
 width=100, height=100,
 expand=TRUE, no_popup=TRUE)
#Handle to find sample associated with mouse click on graph
gwidgets2::addHandlerChanged(ggacp, interact_w_pca_plot)
```

```

interact_w_pca_plot <- function(h,...)
 # Manage user interaction with graphics
 # IF isselectMode is TRUE (isZoomMode and isZoomAll are false):
 # This finds samples isolated by dragging a rectangle with mouse.
 # Just clicking cancel selection.
```

```
}else #this is a rectangle
{
 gwidgets2::enabled(subset_from_ACPPlotbut) <- TRUE
 #Find points in rectangle
 with (sc_plot_params, {
 indices <- which(Xsc>h$x[1] & Xsc<h$x[2]
 & Ysc>h$y[1] & Ysc<h$y[2])
 #redraw the points with a small black dot
 gwidgets2::visible(ggacp) <- TRUE
 points(Xsc[indices],Ysc[indices],pch=20, cex=0.75, col="white")
 ISR_env$SelectedScores <- c(indices,ISR_env$SelectedScores)
 ISR_env$SelectedScores=sort(ISR_env$SelectedScores[!duplicated(ISR_env$SelectedScores)])
 }
}
```

```
> h
$`obj`
Object of class GGraphics

$action
NULL

$x
[1] -0.3218085 1.3297872

$y
[1] 6.886076 12.126582
```



# Interaction de base avec graphiques

```
ggacp <- gwidgets2::ggraphics(cont=pca_tab,
 width=100, height=100,
 expand=TRUE, no_popup=TRUE)
#Handle to find sample associated with mouse click on graph
gwidgets2::addHandlerChanged(ggacp, interact_w_pca_plot)
```

```

interact_w_pca_plot <- function(h,...)
 # Manage user interaction with graphics
 # IF isselectMode is TRUE (isZoomMode and isZoomAll are false):
 # This finds samples isolated by dragging a rectangle with mouse.
 # Just clicking cancel selection.
```

```
}else #this is a rectangle
{
 gwidgets2::enabled(subset_from_ACPPlotbut) <- TRUE
 #Find points in rectangle
 with (sc_plot_params, {
 indices <- which(Xsc>h$x[1] & Xsc<h$x[2]
 & Ysc>h$y[1] & Ysc<h$y[2])
 #redraw the points with a small black dot
 gwidgets2::visible(ggacp) <- TRUE
 points(Xsc[indices],Ysc[indices],pch=20, cex=0.75, col="white")
 ISR_env$selectedScores <- c(indices,ISR_env$selectedScores)
 ISR_env$selectedScores=sort(ISR_env$selectedScores[!duplicated(ISR_env$selectedScores)])
 }
}
```

```
> h
$`obj`
Object of class GGraphics

$action
NULL

$x
[1] -0.3218085 1.3297872

$y
[1] 6.886076 12.126582
```

# Interaction de base avec graphiques

```
ggacp <- gwidgets2::ggraphics(cont=pca_tab,
 width=100, height=100,
 expand=TRUE,no_popup=TRUE)
#Handle to find sample associated with mouse click on graph
gwidgets2::addHandlerChanged(ggacp,interact_w_pca_plot)
```

```

interact_w_pca_plot <- function(h,...)
 # Manage user interaction with graphics
 # IF isselectMode is TRUE (isZoomMode and isZoomAll are false):
 # This finds samples isolated by dragging a rectangle with mouse.
 # Just clicking cancel selection.
```

```
}else #this is a rectangle
{
 gwidgets2::enabled(subset_from_ACPPlotbut) <- TRUE
 #Find points in rectangle
 with (sc_plot_params, {
 indices <- which(Xsc>h$x[1] & Xsc<h$x[2]
 & Ysc>h$y[1] & Ysc<h$y[2])
 #redraw the points with a small black dot
 gwidgets2::visible(ggacp) <- TRUE
 points(Xsc[indices],Ysc[indices],pch=20, cex=0.75, col="white")
 ISR_env$SelectedScores <- c(indices,ISR_env$SelectedScores)
 ISR_env$SelectedScores=sort(ISR_env$SelectedScores[!duplicated(ISR_env$SelectedScores)])
 }
}
```

```
> h
$`obj`
Object of class GGraphics

$action
NULL

$x
[1] -0.3218085 1.3297872

$y
[1] 6.886076 12.126582
```

# Package inspectrar

<https://github.com/PannetonB/inspectrar>

## Using InSpectoR

A GUI for working with spectral data

Bernard Panneton

2019-05-01

- 1 Introduction
- 2 Structure of the data set
  - 2.1 File naming convention
    - 2.1.1 Y data file
    - 2.1.2 X data files
  - 2.2 File content
    - 2.2.1 Y data file
    - 2.2.2 X data files
- 3 Using the *InSpectoR* GUI
  - 3.1 *Data selection* tab
    - 3.1.1 Loading a data set
    - 3.1.2 Selecting X data types
    - 3.1.3 Visualising spectra
    - 3.1.4 Manipulating the data set
  - 3.2 *PrePro* tab
    - 3.2.1 Set wavelength/wavenumber limits
    - 3.2.2 Scaling on a per spectrum basis
    - 3.2.3 Parameters for the Savitzky-Golay filtering
  - 3.3 *PCA* tab
    - 3.3.1 Choose plot type frame
    - 3.3.2 Pick PC1 and Pick PC2
    - 3.3.3 Point coloring options
    - 3.3.4 Point labeling options
    - 3.3.5 Data ellipse plotting
    - 3.3.6 Interacting with the plot area
    - 3.3.7 Saving PCA results



# Trucs - Disposition du code dans Rstudio

```
469
470 *****
471 # GetTEC définit un objet pour le contrôle de la température du détecteur
472 #
473 # ENTRÉES
474 # leSpectro : liste créée par Define_Spectro
475 #
476 # SORTIES
477 # leSpectro auquel le TEC est ajouté dans la liste
478 *****
479 GetTEC <- function(leSpectro, mywrap) {
480 leSpectro$TEC <-
481 mywrap$getFeatureControllerThermoElectric(as.integer(leSpectro$number))
482 Sys.sleep(0.2)
483 return(leSpectro)
484 }
485
486
487 *****
488 # CoolSpectro permet d'abaisser la température du détecteur et de mettre le
489 # ventilateur en route.
490 #
491 # ENTRÉES
492 # leSpectro : liste créée par Define_Spectro
493 # mywrap : membre mywrap de la liste créée par start_oo()
494 # Temp : température désirée en °C
495 #
496 # SORTIES
497 # La température atteinte en sortie de fonction
498 *****
499 CoolSpectro <- function(leSpectro, mywrap, Temp) {
500 TEC = leSpectro$TEC
501 TEC$setDetectorSetPointCelsius(as.double(Temp))
502 Sys.sleep(0.3)
503 TEC$setTECEnable(as.logical(TRUE))
504 Sys.sleep(1.0)
505 TEC$setFanEnable(as.logical(TRUE))
506 Sys.sleep(0.3)
507 ttest = TEC$getDetectorTemperatureCelsius()
508 Sys.sleep(0.3)
509 ttest = TEC$getDetectorTemperatureCelsius()
510 ttest_old = ttest
511 ttest = Temp + 2 #Forcer au moins une boucle "while"
512 while (ttest > Temp + 1) {
513 cat(as.character(ttest), "\n")
514 Sys.sleep(3)
515 ttest = TEC$getDetectorTemperatureCelsius()
516 if ((ttest_old - ttest) < 0.5) {
517 TEC$setDetectorSetPointCelsius(as.double(Temp))
518 Sys.sleep(0.3)
519 TEC$setTECEnable(as.logical(TRUE))
520 }
521 ttest_old = ttest
522 }
523 return(TEC$getDetectorTemperatureCelsius())
524 }
525
526
527 *****
528
```

```
469
470 *****
471 # GetTEC définit un objet pour le contrôle de la température du détecteur
472 #
473 # ENTRÉES
474 # leSpectro : liste créée par Define_Spectro
475 #
476 # SORTIES
477 # leSpectro auquel le TEC est ajouté dans la liste
478 *****
479 GetTEC <- function(leSpectro, mywrap) {
480
481
482
483
484
485
486
487 *****
488 # CoolSpectro permet d'abaisser la température du détecteur et de mettre le
489 # ventilateur en route.
490 #
491 # ENTRÉES
492 # leSpectro : liste créée par Define_Spectro
493 # mywrap : membre mywrap de la liste créée par start_oo()
494 # Temp : température désirée en °C
495 #
496 # SORTIES
497 # La température atteinte en sortie de fonction
498 *****
499
500 CoolSpectro <- function(leSpectro, mywrap, Temp) {
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527 *****
528
```



# Trucs - Disposition du code dans Rstudio

```
469
470 *****
471 # GetTEC définit un objet pour le contrôle de la température du détecteur
472 #
473 # ENTRÉES
474 # leSpectro : liste créée par Define_Spectro
475 #
476 # SORTIES
477 # leSpectro auquel le TEC est ajouté dans la liste
478 *****
479 GetTEC <- function(leSpectro, mywrap) {
480 leSpectro$TEC <-
481 mywrap$getFeatureControllerThermoElectric(as.integer(leSpectro$number))
482 Sys.sleep(0.2)
483 return(leSpectro)
484 }
485
486
487 *****
488 # CoolSpectro permet d'abaisser la température du détecteur et de mettre le
489 # ventilateur en route.
490 #
491 # ENTRÉES
492 # leSpectro : liste créée par Define_Spectro
493 # mywrap : membre mywrap de la liste créée par Start_00()
494 # Temp : température désirée en °C
495 #
496 # SORTIES
497 # La température atteinte en sortie de fonction
498 *****
499 CoolSpectro <- function(leSpectro, mywrap, Temp) {
500 TEC = leSpectro$TEC
501 TEC$setDetectorSetPointCelsius(as.double(Temp))
502 Sys.sleep(0.3)
503 TEC$setTECEnable(as.logical(TRUE))
504 Sys.sleep(1.0)
505 TEC$setFanEnable(as.logical(TRUE))
506 Sys.sleep(0.3)
507 ttest = TEC$getDetectorTemperatureCelsius()
508 Sys.sleep(0.3)
509 ttest = TEC$getDetectorTemperatureCelsius()
510 ttest_old = ttest
511 ttest = Temp + 2 #Forcer au moins une boucle "while"
512 while (ttest > Temp + 1) {
513 cat(as.character(ttest), "\n")
514 Sys.sleep(3)
515 ttest = TEC$getDetectorTemperatureCelsius()
516 if ((ttest_old - ttest) < 0.5) {
517 TEC$setDetectorSetPointCelsius(as.double(Temp))
518 Sys.sleep(0.3)
519 TEC$setTECEnable(as.logical(TRUE))
520 }
521 ttest_old = ttest
522 }
523 return(TEC$getDetectorTemperatureCelsius())
524 }
525
526
527 *****
528
```

Make\_Man\_from\_Source.r



```

#

leSpectro <- GetTEC(leSpectro, 00obj)
#
GetTEC définit un objet pour le contrôle de la température du détecteur.
ATTENTION: ne gère pas les erreurs. L'utilisateur doit s'assurer que le spectro
permet le contrôle de température du détecteur par effet Peltier.
#
ENTRÉES
leSpectro : liste créée par Define_Spectro
00obj : liste créée par Start_00()
#
SORTIES
leSpectro auquel le TEC est ajouté dans la liste
#

T <- CoolSpectro(leSpectro, Temp, outputarea)
#
CoolSpectro permet d'abaisser la température du détecteur et de mettre le
ventilateur en route.
ATTENTION: ne gère pas les erreurs. L'utilisateur doit s'assurer que le spectro
permet le contrôle de température du détecteur par effet Peltier.
#
ENTRÉES
leSpectro : liste créée par Define_Spectro
```